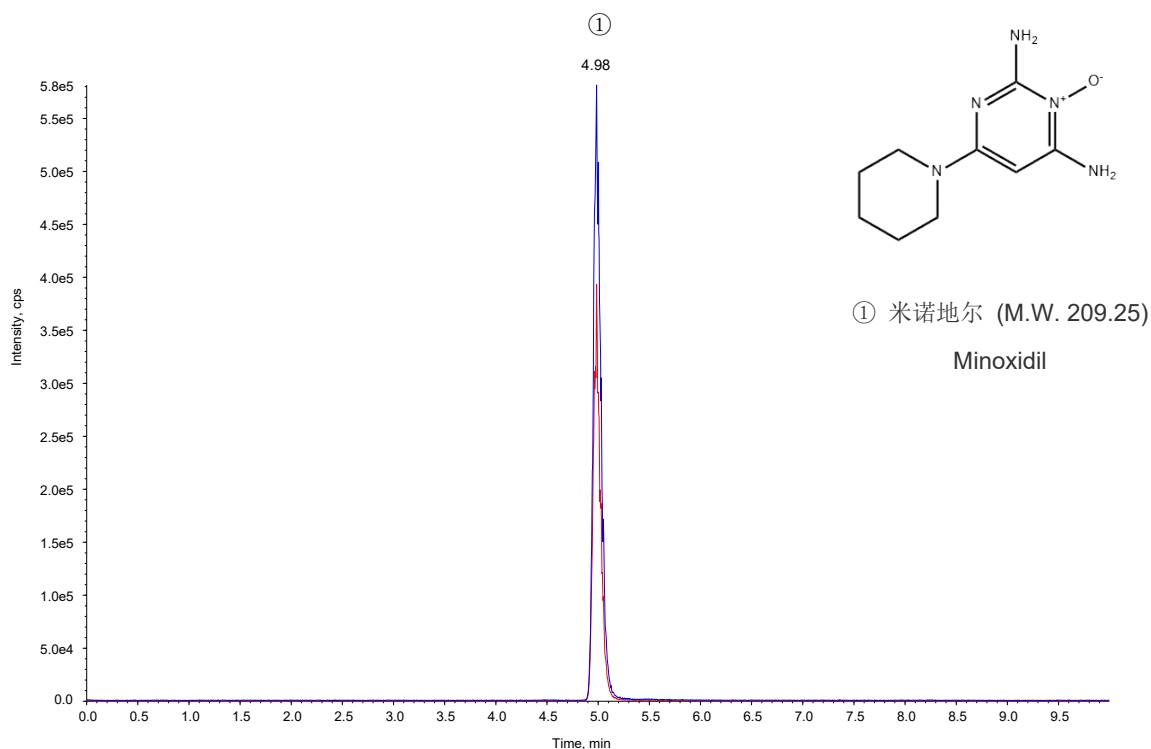


**色谱条件（GB/T 35837-2018 化妆品中禁用物质米诺地尔的测定 高效液相色谱法附录 B）**

色谱柱 : CAPCELL PAK C₁₈ MGIII S3; 2.0 mm i.d. × 150 mm
流动相 : A : 0.1%甲酸溶液 B : 乙腈
 : B(%) 10%(0 min)→10%(2 min)→40%(4 min)→40%(6 min)→10%(6.1min)
流 速 : 0.3 mL/min
温 度 : 40 °C
检 测 : QTRAP 5500; ESI Positive 离子源 4500V 450°C; MRM 210.1 > 193.1 (CE 19)
 : 210.1 > 164.1 (CE 28) DP 60
进样量 : 5 μL
浓 度 : 标准品 10 ppb